

Hướng dẫn Gửi trả lại

Kiểm tra kỹ xem bạn đã ghi danh mẫu của bạn tại everlywell.com/register và thêm nhãn dán ID có thông tin của bạn vào ống mẫu.


1



Rửa tay

Rửa tay thật sạch bằng xà phòng và nước trong 20 giây.

2

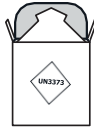

Lắp ráp hộp

Lắp ráp hộp vận chuyển của bạn. Xem video lắp ráp hộp của chúng tôi tại everlywell.com/collect.


3



Chuẩn bị mẫu

Đặt túi nguy hiểm sinh học của bạn vào trong hộp. Hộp bảo vệ thêm trong quá trình vận chuyển.

4

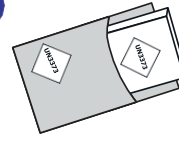

Đặt hộp vào bưu phẩm

Với bàn tay sạch, đặt hộp vận chuyển vào bưu phẩm trả trước. Dán nhãn vận chuyển lên mặt trước của bưu phẩm. **Đừng che nhãn UN3373.**

5



Miếng lót chuẩn bị sẵn

Khử trùng bưu phẩm

Sử dụng miếng lót chuẩn bị sẵn được cung cấp để khử trùng bưu phẩm, tránh nhãn địa chỉ, trước khi hoàn tất bước vận chuyển cuối cùng.

6



Chuyển

Chuyển gói hàng trả trước, có địa chỉ trước đến hộp đựng của nhà cung cấp dịch vụ thích hợp. Điều quan trọng là bạn gửi mẫu của bạn vào **cùng ngày bạn lấy trước lần nhận hàng cuối cùng** để vận chuyển qua đêm. **Không giao hàng mẫu vào cuối tuần.**

IS-EVW-CVD19 r002

* Bộ thu gom tại nhà này đã được FDA cho phép theo EUA.
* Bộ thu thập tại nhà này chỉ được ủy quyền cho việc thu thập và bảo quản tại nhà các mẫu tâm bông như một biện pháp hỗ trợ phát hiện xét nghiệm từ SARS-CoV-2, không phải cho bất kỳ vi rút hoặc mầm bệnh nào khác.
* Bộ thu gom tại nhà này kết hợp với thử nghiệm được ủy quyền trong quy trình thời gian tuyến tính để phát hiện các tình huống biến chứng cho việc sử dụng khăn giấy các xét nghiệm chẩn đoán trong tình huống khẩn cấp để phát hiện và / hoặc chẩn đoán COVID-19 theo Mục 564 (b) (1) của Đạo luật, 21 U.S.C. § 360bb-3 (b) (1), từ khi việc cấp phép bị chấm dứt hoặc bị thu hồi sớm hơn.
Tồn tại các tình huống biến chứng cho việc sử dụng khăn giấy các xét nghiệm chẩn đoán trong tình huống khẩn cấp để phát hiện và / hoặc chẩn đoán COVID-19 theo Mục 564 (b) (1) của Đạo luật, 21 U.S.C. § 360bb-3 (b) (1), từ khi việc cấp phép bị chấm dứt hoặc bị thu hồi sớm hơn.

Cài gì tiếp theo?

Bộ sưu tập COVID-19 Thử nghiệm Tại nhà

Hướng dẫn

Bộ dụng cụ của bạn bao gồm:



Tăm bông và ống




Hình dán bộ ID




Túi Nguy hiểm sinh học



Tấm thấm

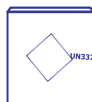

Hộp gửi lại

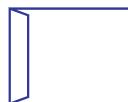

Phong bì gửi lại



Nhãn gửi lại



Miếng lót chuẩn bị sẵn

Chỉ Rx, Để Sử dụng Dưới sự cho Phép Sử dụng Khẩn cấp

Câu hỏi?

support.everlywell.com

contact@everlywell.com

855.422.3855


Lời nhắc Quan trọng

Đảm bảo hoàn thành 3 bước này trước khi gửi bộ tài liệu của bạn qua đường bưu điện.

Bộ ghi danh



Điền vào hình dán ID bộ

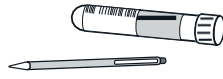

Giao hàng trong ngày



Truy cập www.everlywell.com/register và hoàn tất ghi danh của bạn.

Phòng thí nghiệm **chỉ có thể** xử lý mẫu của bạn nếu bạn:

- Ghi danh mẫu của bạn tại everlywell.com/register
- Điền nhãn dán ID và kết vào ống mẫu của bạn
- Gửi mẫu ngay trong ngày bạn lấy

Hướng dẫn Thu thập Mẫu

Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn chặt chẽ để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp cho việc đóng gói và gửi COVID-19 mẫu đến phòng thí nghiệm thu thập của chúng tôi. Đảm bảo bạn có thể giao hàng trong ngày lấy hàng.

1



Ghi danh

Bạn phải ghi danh bộ tài liệu của bạn tại everlywell.com/register trước khi bạn thu thập. Phòng thí nghiệm không thể xử lý mẫu của bạn nếu bước này bị bỏ qua.

2



Xem video

Để có kết quả tốt nhất, hãy xem video bộ sưu tập của chúng tôi tại everlywell.com/collect trước khi bạn bắt đầu.

3



Định vị hộp bỏ xuống

Kiểm tra nhãn gửi lại của bạn để xác định xem gói hàng của bạn sẽ được vận chuyển qua FedEx hay UPS. Truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ để xem các vị trí hộp thả và lịch trình lấy hàng. Không giao hàng mẫu vào cuối tuần. **Trả mẫu của bạn vào cùng ngày bạn lấy trước lần lấy hàng cuối cùng.**

4



Điền vào hình dán ID bộ

Đặt nhãn dán ID trên ống thu thập. Đừng che nhãn dán mã vạch đã có trên ống. Viết họ tên, ngày tháng năm sinh và ngày thu thập. Thông tin của bạn **phải** khớp với thông tin bạn đã sử dụng để ghi danh bộ tài liệu của bạn. **Không đổ chất lỏng ra khỏi ống.**

5



Chuẩn bị không gian và rửa tay

Khử trùng các bề mặt nơi bạn sẽ hoàn thành bài kiểm tra của bạn. Xi mũi. Sau đó rửa kỹ tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây trước khi lấy.


6



Chuẩn bị thu thập

Trước khi đưa tăm bông vào, hãy xác định vị trí lỗ thủng trên tăm bông (gần đầu tăm) vì bạn sẽ cần nó sau khi lấy mẫu. Sau đó nghiêng đầu về phía sau một góc khoảng 45 độ.


7

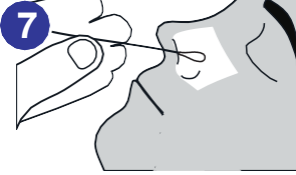

Chèn bông ngoáy mũi

Giữ miếng gạt bên dưới đường thủng. Nhẹ nhàng và từ từ đưa tăm bông vào lỗ mũi của bạn, khoảng **1 phân Anh** cho đến khi đạt được lực cản nhẹ nhàng.


8

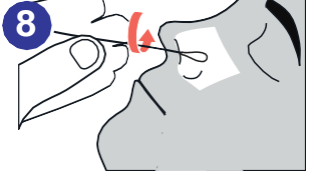

Thu thập mẫu tăm bông

Xoay miếng gạt 3 lần quanh thành mũi với một áp lực nhẹ. Loại bỏ miếng gạt. **Lặp lại quá trình này ở lỗ mũi khác bằng cách sử dụng cùng một miếng gạt.**

9

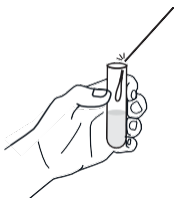

Đặt mẫu tăm bông vào ống

Đặt mẫu tăm bông (đầu xuống) trong ống mà không làm đổ chất lỏng. Bẻ miếng gạt ở đường đục lỗ (gần đầu tăm) và để lại trong ống. Nắp đậy chặt chẽ.

10



Tắm thấm

Đặt ống vào túi

Đặt tăm thấm và ống mẫu vào túi bảo vệ sinh học. Làm theo hướng dẫn quay lại ở phía sau.